

Be Independent.™

INDEPENDENCE BED TABLE™

BECAUSE YOUR BED RAIL CAN PROVIDE SAFETY AND CONVENIENCE



NEW
FALL 2012

PRODUCT #5900



WATCH A DEMO





Ergonomic Grip
Assists In and Out of Bed

La Barra Ergonómica Lo Ayuda a Meterse y a Salir de la Cama



Tray Swivels Out of the Way
La Bandeja se Aparta Hacia Afuera



Includes Organizer Pouch
Incluye Bolsillo Organizador

FEATURES & BENEFITS

- **Ergonomic Handle** - Allows for easy transfer in and out of bed.
Barra Ergonómica - Ayuda a Meterse y a Salir de la Cama Fácilmente
- **Swivel Tray** - Multi-Use laptop/TV tray. Tray swivels 360°.
Bandeja Giratoria - Bandeja Multi-Usa para Laptop/TV, gira 360°.
- **A Pocket Organizer** - Provides storage space for handy items.
Un Bolsillo Organizador - Provee lugar para mantener objetos a mano.
- **Extendable Legs** - Provides added stability when standing up.
Patas Extensibles - Provee estabilidad adicional cuando está de pie.
- **Height Adjustment** - Accommodates any home or hospital bed.
Altura Ajustable - Se adapta a cualquier cama de hogar u hospital.
- **Easy Installation** - Installs in seconds with no additional tools required.
Fácil Instalación - Se instala en segundos y no requiere herramientas adicionales.

SPECIFICATIONS

- Height Adjustment From Floor to Top of Handle/ Altura Ajustable desde el Piso hasta el Tope de la Barra:** 21" - 44"
- Height Adjustment From Mattress Base to Top of Handle/ Altura Ajustable desde la Base del Colchón al Tope de la Barra:** 17.5" - 22.5"
- Rail Width/ Ancho de la Barra:** 19"
- Height Range From the Floor to Horizontal Support Structure Under Mattress/ Rango de Altura desde el Piso hasta la Estructura Horizontal de Apoyo Debajo el Colchón:** 13.5" - 21.5"
- Depth of Horizontal Support Structure Under Mattress/ Profundidad de la Estructura Horizontal de Apoyo Debajo el Colchón:** 25"
- Weight Capacity of Rail/ Capacidad de Peso de la Barra:** 300 lbs
- Weight Capacity of Tray/ Capacidad de Peso de la Bandeja:** 30 lbs
- Weight of Product/ Peso del Producto:** 10.5 lbs
- Made of: Steel frame with durable powder coat finish/ Hecho de: Marco Metálico con Acabado en Revestimiento de Polvo Durable.**
- Package Dimensions/ Dimensiones del Paquete:** 28" L x 20.25" W x 2.5" H; 9 lbs
- Case of 4 Dimensions/ Caja de 4 Dimensiones:** 28" L x 20.25" W x 10" H; 36 lbs
- Size of Tray/ Tamaño de la Bandeja:** 20" x 17"


EASY ASSEMBLY (No Additional Tools Required)



Attach Base Tubes into the Base Support Tubes. Make Sure the Spring Pins Engage.



Insert the Tray Pivot Tube into One of the Desired Tray Pivot Tube Receiver Holes Located on Top of the Handle.

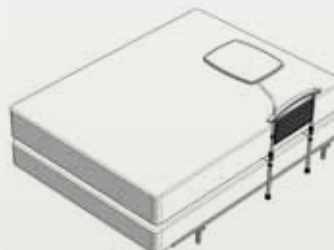

Fully Insert the Assembled Product Between the Mattress and Box Spring of the Bed.



The Height of the Tray Can Be Adjusted by Removing the Tray Pivot Tube From the Handle. Adjust the Clip Pins by Removing them and Reinserting the Clip Pins in the Holes Located in the Handle Upright Tubes.